

## KRUUSE Nahtmaterial exklusiv bei PRO ZÖON



### KRUUSE Sacryl

**Polyfil, beschichtet:** leichte Handhabung, sicheres Knoten

**Synthetisch:** minimale Gewebereaktion

**Beschichtung:** leichter Gewebedurchzug, sicheres Knoten

**Resorption:** durch Hydrolyse

KRUUSE Sacryl ist ein geflochtenes, beschichtetes, polyfiles, synthetisches Nahtmaterial. Es besteht aus Polyglactin 910.

Die weltweit am häufigsten eingesetzten, synthetischen, beschichteten, polyfilen Nahtmaterialien bestehen aus Polyglactin 910.

Aufgrund seiner herausragenden Eigenschaften hat dieses Nahtmaterial Catgut fast vollständig ersetzt. In der Anwendung hat sich gezeigt, dass KRUUSE Sacryl nicht antigen wirkt und nur sehr milde Gewebereaktionen bei der Resorption verursacht.

**Resorption: auflösend:**

- Vollständige Auflösung nach ungefähr 56 - 63 Tagen
- Resorption durch Hydrolyse

**Chemische Zusammensetzung:**

- KRUUSE Sacryl besteht aus Polyglactin 910 (Copolymer aus 90% Glycolid und 10% L-Lactid)

**Reißfestigkeit**

- Noch 70% nach 14 Tagen
- Noch 50% nach 21 Tagen ( 6-0 und dicker)
- Noch 40% nach 21 Tagen ( 7-0 und dünner)
- Noch 25% nach 28 Tagen
- Vollständige Auflösung nach ungefähr 56-63 Tagen

**Farbe:**

- Violett, ungefärbt

**Indikationen:**

KRUUSE Sacryl ist für Weichteilgewebenähte und Ligaturen geeignet, wo das Nahtmaterial resorbiert werden muss:

- Nähte der Subkutis
- Faszien
- Gelenkkapseln
- Muskeln
- Uterus und Magen Darm Trakt
- Gefäße
- Ophtalmologie

**Kontraindikationen:**

- Alle Anwendungen mit nicht resorbierbarem Fadenmaterial

**Fadenstärken:**

- USP 8-0 bis 2
- EP 0,4 -5

**Sterilisationsmethode:**

- EO



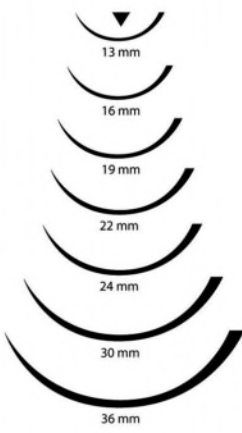

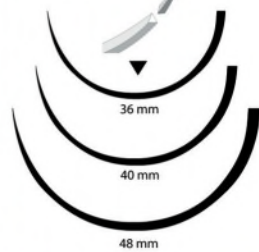

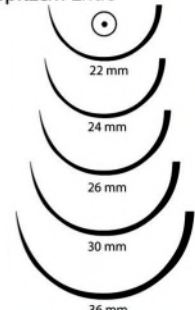
**Packungsgrößen:**

- Packungen mit 18 Peelpacks



## KRUUSE Nahtmaterial exklusiv bei PRO ZOON

### KRUUSE Sacryl

Nadelform	Nadel- länge	USP	EP	Länge in cm	Farbe des Fadens	Packungsgröße	Kat. Nr.
<b>3/8 Kreis Spatula mit Mikrospitze</b> 	6.5	8-0	0.4	30	Violett	18	152314
<b>3/8 Kreis schneidende Nadel</b>  	13	6-0	0.7	45	Violett	18	152313
	16	6-0	0.7	70	Violett	18	152312
	16	5-0	1	45	Violett	18	152310
	19	5-0	1	45	Violett	18	152309
	19	4-0	1.5	70	Violett	18	152303
	19	3-0	2	45	Violett	18	152300
	19	3-0	2	70	Violett	18	152297
	22	6-0	0.7	45	Violett	18	152311
	22	5-0	1	45	Violett	18	152308
	24	4-0	1.5	70	Violett	18	152304
	24	3-0	3	70	Violett	18	<u>152296</u>
	24	2-0	3	70	Violett	18	<u>152290</u>
	30	3-0	2	70	Violett	18	<u>152301</u>
	30	2-0	3	70	Violett	18	<u>152294</u>
	30	0	3.5	70	Violett	18	<u>152280</u>
	36	4-0	1.5	45	Violett	18	152306
	36	1	4	70	Violett	18	152286
	<b>1/2 Kreis schneidende Nadel</b>  	36	2-0	3	70	Violett	18
36		0	3.5	70	Violett	18	152283
40		0	3.5	70	Violett	18	152284
48		0	3.5	70	Violett	18	152285
48		1	4	70	Violett	18	152288
48		2	5	90	Violett	18	152289
<b>1/2 Kreis Rundkörpernadel mit spitzem Ende</b>  	22	3-0	2	70	Violett	18	152298
	24	4-0	1.5	70	Violett	18	152305
	26	3-0	2	70	Violett	18	152299
	26	2-0	3	70	Violett	18	152291
	30	0	3.5	70	Violett	18	152281
	36	2-0	3	70	Violett	18	152293
	36	1	4	70	Violett	18	152287